

Sobre Colchão Anti-escara Domus II +

Origem: Espanha **Marca:** Apex **Classificação ISO:** 04 33 06

Características

Sobre colchão de pressão alterna para prevenção e tratamento de pacientes com risco baixo a médio de desenvolver escaras de decúbito. Constituído por células individuais que enchem e esvaziam alternadamente num ciclo de 10min, a pressão é periodicamente redistribuída. As 3 primeiras células do topo mantêm-se cheias, de modo a simular uma almofada. Os orifícios laser de baixa perda de ar na zona central permitem o controlo da ventilação e humidade, oferecendo ao paciente o máximo conforto. Compressor compacto e silencioso, com indicadores de pressão recomendados em função do peso do paciente. Alarme de baixa pressão. Com capa impermeável a líquidos e permeável ao ar. Com conector rápido para o transporte do paciente. Deve ser utilizado por cima de um colchão de base ou colocando uma espuma adicional.

Finalidade do Produto

Este sobre-colchão está indicado para prevenção e tratamento de escaras até grau II.


Garantia e Prazo de Entrega

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico, excepto para componentes de desgaste rápido. Prazo de entrega estimado: em stock 1 a 2 dias. Sem stock 2 a 3 semanas.

Sobre colchão anti-escaras Domus II + (61 CL AE D II)		
Compressor	<i>Voltagem</i>	AC 230V 50Hz - 0,05A
	<i>Fluxo de ar</i>	4L/min
	<i>Intervalo de pressão</i>	50-105mmHg
	<i>Ciclo temporal</i>	9,6min
	<i>Dim. (CxLxA)</i>	25x13,5x9,5cm
	<i>Peso</i>	2Kg
Colchão	<i>Estrutura</i>	18 células 10,2cm altura
	<i>Material capa</i>	Nylon/PU
	<i>Material células</i>	Nylon/PVC
	<i>Material base</i>	Nylon/PU
	<i>Dim. (CxLxA)</i>	200x80x10,2cm
	<i>Peso máx. paciente</i>	140Kg



Conector rápido

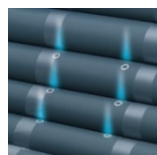

Orifícios laser